



— Soft laser expertise

premio 30

Laser duo



Acupunctuur
Auriculotherapie
Verslavingen
Reflexotherapie



premio 30

Laser duo

Pijnloze prikkeling van de punten van het lichaam en het oor



4 behandelwijzen



**2 vermogens
voor**

aan het huidoppervlak
Diepliggende punten



**Autonomie:
meer dan 10 uur**

Oplaadbare
batterij

Traditioneel en innovatief: veilig en werkzaam

Acupunctuur

Tonificatie

Gecontroleerde en snelle tonificatie van de acupunctuurpunten.



Dispersie

U verricht in enkele seconden de dispersie van de Qi en u verwijdert de energiestase.



Harmonisatie

Deze behandeling brengt het punt en de circulatie in de meridiaan weer in balans door de afwisselende pulstempo's.



Auriculotherapie

Frequentiële prikkeling

Deze functie garandeert de prikkeling van de 'pathologische' punten in de auriculotherapie (pijn, psychische stoornissen, functionele stoornissen, verslaving, enz.).



Innovatie en doeltreffendheid frequentie

Nieuwe emissiedynamiek van de pulsen


Wobulation (100-10 000Hz)

Exponentiële versnelling

Door het emissietempo van de pulsen te versnellen wordt tonificatie verkregen wat een dynamiserend effect heeft.



Tonification
impulse rate

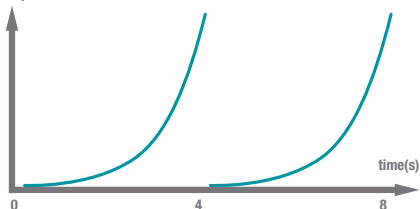


Exponentiële vertraging

Dispersie wordt verkregen door de **vertraging** van het **emissietempo** van de pulsen.



Dispersion
impulse rate

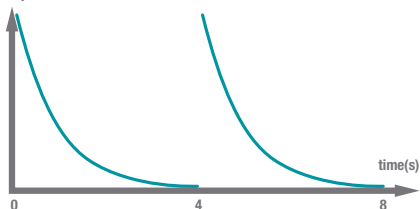


Afwisselend versnellen en vertragen

Afwisselend versnellen en vertragen van het emissietempo leidt tot harmonisatie van het punt.



Harmonisation
impulse rate

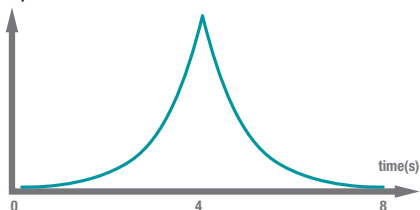

Opeenvolgende emissie

Volgens de 7 Nogier frequenties

De boodschap zit in de frequentie voor dit auriculotherapie-programma.

Dit programma gebruikt een opeenvolgende emissie van **alle Nogier frequenties** (A, B, C, D, E, F, en G).





Erkende specialist in **pulslasertechniek**

Golflengte

De infrarood-emissie op een golflengte van **905 nm** passeert de huidbarrière, bereikt de diepliggende cellen en dringt in alle veiligheid door zonder te worden geabsorbeerd door het water, de hemoglobine en de melanine van de huid.

Piekwaarde

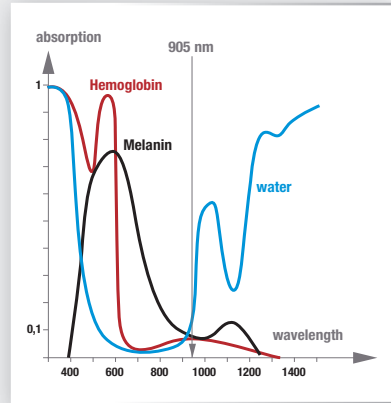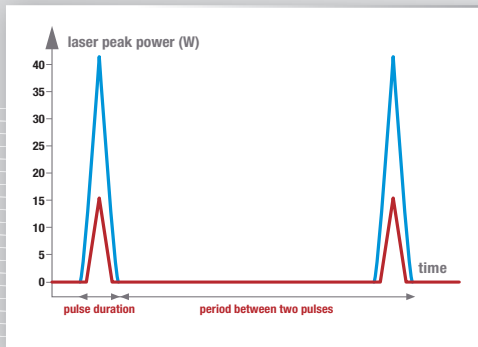

De laserstralen worden uitgezonden in korte pulsen met een hoge piekwaarde. Deze emissiewijze geeft de laserstraal **het vermogen dat nodig is om in het weefsel door te dringen** zonder het te beschadigen, want het brengt de nuttige informatie zonder beschadigend thermisch effect naar het punt.

Regelbaar vermogen

Het vermogen van 15 of 40 watt kan worden ingesteld voor de gewenste diepte

- **Oppervlakkige punten:** punt aan het huidoppervlak (gezicht, oren, enz.)
- **Diepliggende punten:** andere punten van het lichaam.

Toepassingstijd

Korte **behandeling van 30 seconden** voor elk punt. Deze toepassingstijd geeft elk punt optimale energie en houdt rekening met de fysiologische reactietijd van het lichaam.

Het **+** van Sedatelec:
wobble frequentie bij acupunctuur

De signatuur van Sedatelec:
Nogier frequenties bij auriculotherapie



premio 30

Laser duo

**Werkzaam, licht
en ergonomisch**

Een draadloze laser
ideaal in de praktijk
en aan huis



Onzichtbare laseremissie. Richt de laserstraal niet op de ogen. Classificatie 3B volgens IEC60825-1

Caution : Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



AcupunctuurDirect.nl

Alles voor uw acupunctuurpraktijk, direct bij u thuisbezorgd

CE 0123

Vervaardigd in Frankrijk

L'Univers B.V. - Prins Hendrikeweg 2 - 3771 AK Barneveld
T 0342-420664 - info@acupunctuurdirect.nl - www.acupunctuurdirect.nl

